



Innovation

Følelsen af
frihed

Diveen®

Vaginal tampon designet til
at reducere anstrengelses
urininkontinens⁽¹⁾

Diveen® gør livet lettere...

Millioner af kvinder verden over lider af anstrengelses urininkontinens også kaldet stress urininkontinens.

Har du problemer, når du griner eller dyrker sport?

Urininkontinens påvirker din dagligdag. Forhindrer det dig i, at leve det liv du ønsker?⁽²⁾

Lad det ikke styre dig

Vælg Diveen®, den diskrete løsning!



- Hvad er Diveen® ?

Diveen® er en vaginal tampon til kvinder som lider af anstrengelses- eller andre former for urininkontinens.

Klinisk dokumenteret effekt mod anstrengelses urininkontinens hos kvinder⁽³⁾

Diveen® reducerer gennemsnitligt urinlækage med op til 69% ⁽³⁾

Diveen® øger livskvaliteten for inkontinente kvinder

vs. satisfaction score of 5/100 for patients who did not use Diveen ⁽³⁾

(1) Brevet EP 1 924 218 B1

(2) Haab F. et al. Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en Urologie 2001, 11:336-339

(3) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International Urogynecology-Journal 2012, 23 (12): 1727-34

Hvorfor vælge Diveen®?

Diskret, let at anvende og effektiv⁽³⁾

Diveen Applikator®

Diveen®

Indføringshylster

Indføringsstempel

Udtrækstråd

Fleksibel ring

Fast del

Innovativ og patenteret⁽¹⁾



Diveen® er udformet til at støtte skedevæggen i området under blærehalsen. Ved anstrengelser, vil vægten fra blæren lægge tryk på den fleksible ring på Diveen® sådan, at den faste del vil lukke urinrøret.

Du kan se en film på YouTube om anvendelse af Diveen®
Du skal blot søge efter...

"Diveen® – vaginal tampon"





Varenr.:	Størrelse:	Pakkestørrelse
3132N	Small	5 stk. +1 indføringshylster
3133N	Medium	5 stk. +1 indføringshylster
3022N	Small	15 stk. +1 indføringshylster
3023N	Medium	15 stk. +1 indføringshylster
3025N	Prøvepakke	1 stk. S + 1 stk. M + 1 stk. indføringshylster

CE 0123

B. Braun Medical A/S | Dirch Passers Allé 27,3. sal
2000 Frederiksberg | www.bbraun.dk

Dette dokument, dets indhold, inklusive data, information, varemærker og logoer nævnt heri er B. Brauns eksklusive ejendom. Enhver repræsentation og / eller gengivelse, helt eller delvis, af dette dokument og dets indhold, uden udtrykkeligt forudgående samtykke fra B. Braun, er strengt forbudt og udgør en krænkelse af B. Brauns ejendomsrettigheder. Ikke bindende dokumenter og fotografier er kun til sundhedsfagligt brug. Læs brugsanvisningen omhyggeligt.

Sådan anvender du Diveen® *

1. Inden anvendelse

- Vask hænder.
- Find en komfortabel stilling.


2. Klargøring

- Fjern indføringsstemplet fra indføringshylstret. Klem den fleksible ring (Diveen®) forsigtigt sammen, før den ind i indføringshylstret.
- Sæt indføringsstemplet tilbage i indføringshylstret for at gøre klar til indføring.



3. Indføring

- Før indføringshylstret ind i skeden.
- Diveen® skubbes på plads ved hjælp af indføringsstemplet (lige som på en almindelig tampon). Træk indføringshylsteret ud og rengør det inden næste indføring. Diveen må sidde i op til 12 timer og må max. anvendes 2 gange.

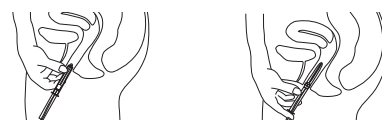

4. Fjernelse

- Træk forsigtigt i udtrækstråden for at fjerne Diveen® fra skeden.



* Læs brugsanvisningen inden anvendelse. Rådfør dig med din læge for bedst mulig behandling af din inkontinens.