

Actreen® Hi-Lite Set

Klart til brug | Let at benytte | NON-TOUCH teknik



Indikation

- Intermitterende kateterisation

Egenskaber

- Enkelt at benytte – flere håndteringsmuligheder
- Klart til brug
- Hydrofilt smøremiddel
- Flytbar beskyttelsesfolie giver godt greb under indføringen
- 'Non-touch system' – let at anvende
- Integreret foldeanordning – 'ready to go'
- Kateteret kan tåle at være bukket op til 24 timer – diskret at medbringe
- Vejer ingenting
- Integreret 1000 ml urinopsamlingspose

Produktbeskrivelse


- Sterilt kateter påført en hydrofil coating, der gør katetret 'klart til brug' samt sikrer, at det er glat og nemt at indføre
- TPO materiale – ingen PVC/Ftalat
- Urinopsamlingsposen har tilbageløbsventil
- Nem tømning af opsamlingsposen
- Nem håndtering og åbning tilpasset fingermotorik. Tre forskellige muligheder for åbning af katetret
- Brugervenlige æsker af miljøvenligt materiale – kan åbnes på to måder
- Unisex produkt: Længde for både Nelaton og Tiemann spids er 39 cm inkl. konnektor og 37 cm ekskl. konnektor
- CE-mærket klasse I steril, medicinsk udstyr



Diskretion & god kontrol



Actreen® Hi-Lite^{Set} kan foldes og er derfor nemt at have med. Det er diskret og vejer næsten ingenting

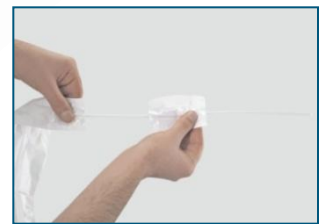

Flytbar beskyttelsesfolie giver god kontrol over kateteret, uden at produktet bliver kontamineret

Nem håndtering – også med nedsat fingermotorik



Åbning ved nedsat fingermotorik

Ved nedsat fingermotorik kan "øret" være en hjælp til at bryde emballagen



Åbning ved god fingermotorik

Actreen® Hi-Lite ^{Set} til mænd, kvinder og børn, Nelaton 39 cm inkl. konnektor og 37 cm ekskl. konnektor, 30 stk./æske						
CH	08 ●	10 ●	12 ○	14 ●	16 ●	18 ●
Varenr.	242208N	242210N	242212N	242214N	242216N	242218N
Actreen® Hi-Lite ^{Set} til mænd, Tiemann 39 cm inkl. konnektor og 37 cm ekskl. konnektor, 30 stk./æske						
CH	08 ●	10 ●	12 ○	14 ●	16 ●	18 ●
Varenr.	242108N	242110N	242112N	242114N	242116N	242118N

Actreen® Hi-Lite Set

Klart til brug | Let at benytte | NON-TOUCH teknik



Indikation

- Intermitterende kateterisation

Egenskaber

- Enkelt at benytte – flere håndteringsmuligheder
- Klart til brug
- Hydrofilt smøremiddel
- Flytbar beskyttelsesfolie giver godt greb under indføringen
- 'Non-touch system' – let at anvende
- Integreret foldeanordning – 'ready to go'
- Kateteret kan tåle at være bukket op til 24 timer – diskret at medbringe
- Vejer ingenting
- Integreret 1000 ml urinopsamlingspose

Produktbeskrivelse



- Sterilt kateter påført en hydrofil coating, der gør kateteret 'klart til brug' samt sikrer, at det er glat og nemt at indføre
- TPO materiale – ingen PVC/Ftalat
- Urinopsamlingsposen har tilbageløbsventil
- Nem tømning af opsamlingsposen
- Nem håndtering og åbning tilpasset fingermotorik. Tre forskellige muligheder for åbning af kateteret
- Brugervenlige æsker af miljøvenligt materiale – kan åbnes på to måder
- Unisex produkt: Længde for både Nelaton og Tiemann spids er 39 cm inkl. konnektor og 37 cm ekskl. konnektor
- CE-mærket klasse I steril, medicinsk udstyr

Actreen® Hi-Lite^{Set} er 'klart til brug'

- ✓ Ingen forberedelsesfase
- ✓ Ingen brug for vand
- ✓ Ingen vandsprøjt eller dryp
- ✓ Flytbar beskyttelsesfolie
- ✓ Integreret urinpose med tilbageløbsventil
- ✓ Nemt at anvende
- ✓ Nemt at åbne og tømme
- ✓ Diskret at medbringe

Det hydrofile smøremiddel:

- Sikrer et velhydreret kateter i mere end 60 min. efter åbning af kateteret. I praksis betyder det, at kateteret forbliver velhydreret og ikke klæber fast til urinrøret, da smøremidlet ikke tørrer ud.
- Påvirker ikke en urinprøves resultat
- Påvirker ikke spermkvaliteten*
- Drypfri

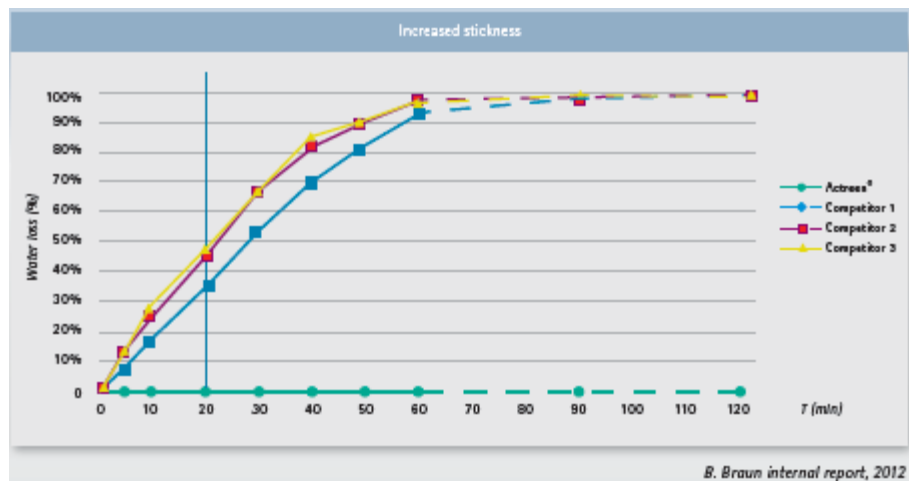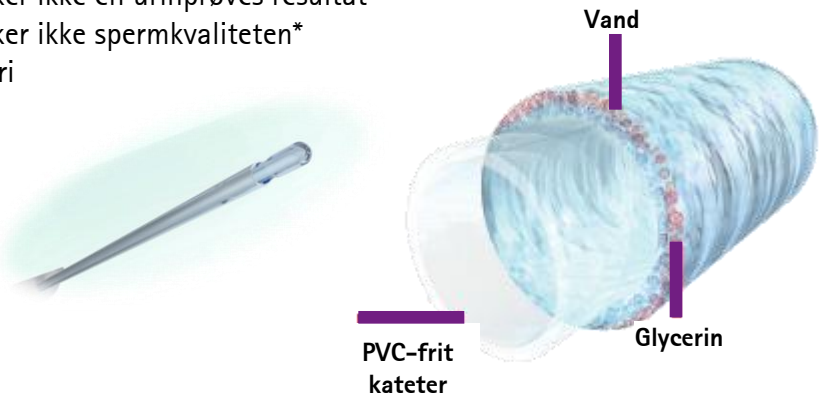

* Effect of short-term exposure to two hydrophilic-coated and one gel prelubricated urinary catheters on sperm viability, motility and kinematics in vitro by J. Auger et al, Minerva Urologica E Nefrologica, vol, 50, N.2